

SIÈGES INCLINABLES DYNAMIQUES
primacare



soins de santé

global

S'incliner sans effort, se déplacer en toute sécurité



Faciles à utiliser, les sièges inclinables dynamique Primacare^{MC} conviennent à toutes sortes d'applications dans les milieux de soins de santé, des soins ambulatoires aux soins de courte et de longue durée. La gamme propose des modèles dotés de roulettes à blocage manuel ou de quatre roulettes à blocage central actionné par des pédales accessibles de chaque côté du siège. Certains modèles fixes et mobiles sont offerts munis d'accoudoirs rabattables pour faciliter le transfert de patients en toute sécurité.

Les sièges sont illustrés garnis d'un textile Elm de Maharam en piquet, l'assise est garnie d'un cuir California de LDI en matin brumeux, les accoudoirs à manchons en surface solide présentent un fini tempête beige.

S'incliner et se détendre

3 positions d'inclinaison et une position d'inclinaison inversée en option



1^{re} position



2^e position



3^e position



Position d'inclinaison inversée (en option)

Les fauteuils inclinables dynamiques Primacare suivent les mouvements de l'utilisateur, qui posera intuitivement ses mains sur les accoudoirs lorsqu'il souhaite passer d'une position inclinée à une position assise. Mais l'ergonomie ne s'arrête pas là, comme la gamme propose entre autres des manchons prolongés vers l'avant offrant une bonne prise, une assise arrondie à l'avant et un soutien lombaire intégré. Les fauteuils inclinables dynamiques Primacare ont une capacité de charge nominale de 400 lb et sont protégés par la garantie limitée à vie de Global.

Vous trouverez un complément d'information sur le [site Web](#) de Global.

Les sièges sont illustrés garnis d'un textile Elm de Maharam en piquet, l'assise est garnie d'un cuir California de LDI en marin brumeux, les accoudoirs à manchons en surface solide présentent un fini tempête beige.

Simplicité et accessibilité

Mouvement de la tablette écriteire



Parallèle à l'accoudoir



À 45° par rapport à l'accoudoir



À 90° par rapport à l'accoudoir

Une tablette écriteire en résine phénolique noire avec sillon collecteur est offerte en option. Elle peut être précisée à droite, à gauche ou des deux côtés d'un siège à accoudoirs fixes. Lorsqu'elle est à la position verticale, la tablette pivote avec une résistance contrôlée sur 360°, sans obstruer le patient lorsqu'il s'assoit ou se relève.


Accoudoirs rabattables



Accoudoir rabattable rabattu



Accoudoir rabattable relevé

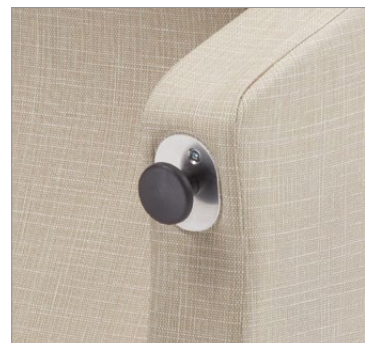

Déblocage de l'accoudoir rabattable actionné par le soignant

Les accoudoirs rabattables facilitent l'accès, aidant au transfert du patient. Le panneau en tissu à rétraction automatique rehausse la protection du patient et offre une surface facile à nettoyer. Les accoudoirs se bloquent automatiquement lorsqu'ils sont placés en position verticale.

Les sièges sont illustrés garnis d'un textile Elm de Maharam en piquet, l'assise est garnie d'un cuir California de LDI en marin brumeux, les accoudoirs à manchons en surface solide présentent un fini tempête beige.

Des accoudoirs fixes ou rabattables définissent chaque modèle



Siège inclinable sur pieds en bois, accoudoirs à manchons en uréthane



Siège inclinable sur roulettes à blocage manuel, accoudoir rabattable à gauche, manchons en bois, tablette étroite à droite, inclinaison inversée et plateau pour pieds



Siège inclinable sur roulettes à blocage central, accoudoir rabattable à droite, manchons en surface solide, tablette étroite à gauche, inclinaison inversée et plateau pour pieds



Siège inclinable sur roulettes à blocage central, accoudoirs rabattables à gauche et à droite, manchons en surface solide, inclinaison inversée et plateau pour pieds

Les modèles sont offerts dotés de pieds fixes en bois, de quatre roulettes pivotantes bloquantes ou de deux roulettes fixes bloquantes à l'avant et deux roulettes pivotantes à l'arrière. Certains modèles sont offerts dotés d'accoudoirs rabattables à gauche ou à droite ou des deux côtés. Un plateau pour pieds escamotable est aussi offert en option pour soutenir les pieds de l'utilisateur lorsque le repose-pieds n'est pas déployé.

Les sièges sont illustrés garnis d'un textile Elm de Maharam en piquet, l'assise est garnie d'un cuir California de LDI en matin brumeux, les manchons en uréthane sont finis ombre, les manchons en bois sont finis crème WC et les manchons en surface solide sont finis tempête beige. Les pieds en bois présentent un fini nuit.

Voyons de plus près



Le fauteuil inclinable dynamique Primacare peut être personnalisé pour répondre aux besoins du patient et du soignant, selon l'utilisation prévue. Des coutures thermocollées sont possibles sur les textiles enduits approuvés pour le dossier, les accoudoirs et l'assise. Il est possible de préciser deux textiles pour garnir le siège, comme le montre l'illustration ci-dessus.

Le siège est illustré garni d'un textile Elm de Maharam en piquet, l'assise et l'appui-tête sont garnis d'un cuir California de LDI en marin brumeux, les accoudoirs à manchons en surface solide présentent un fini tempête beige.

Peaufiné jusqu'aux moindres détails

Dossier



Tissu de protection amovible



Appui-tête profilé réglable, à commander séparément



Barre de poussée chromée (en option)

Actionné par le soignant



Pédale actionnant l'inclinaison inversée (en option)

Rangement




Crochet pivotant pour accessoires (en option)

Caractéristiques



Dégagement sur le côté du coussin d'assise

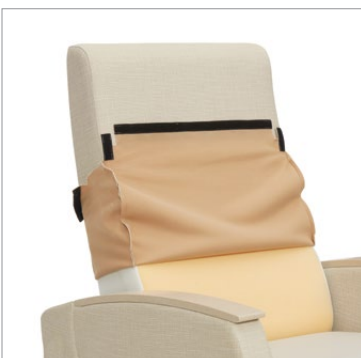


Housses amovibles



La structure de l'assise et du dossier est construite à l'aide d'un système à ressorts plats épais qui ne s'affaissent pas, soutenu par un bâti en acier peint

Manchons

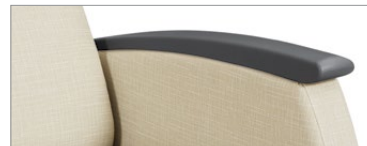

Uréthane



Bois (en option)



Surface solide (en option)

Pieds et roulettes



Bois



Roulettes à blocage manuel (en option)



Roulettes à blocage central actionné par pédale

Pour plus de renseignements sur les produits, y compris les certifications environnementales et du secteur, visitez globalfurnituregroup.com.

En couverture et ci-dessus : Les sièges sont illustrés garnis d'un textile Elm de Maharam en piquet, l'assise est garnie d'un cuir California de LDI en mat brumeux, les accoudoirs à manchons en surface solide présentent un fini tempête beige.



États-Unis

Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tél (856) 596-2390 (800) 220-1900

Canada

Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

International

Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Bureaux partout au Canada et aux États-Unis. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group. © 2025 MD, MC, Marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center 271025 24.0049